
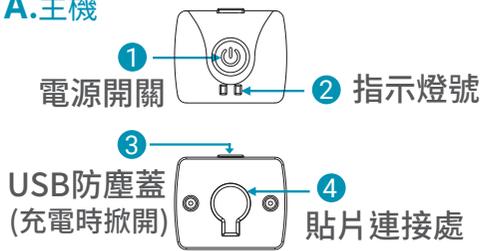
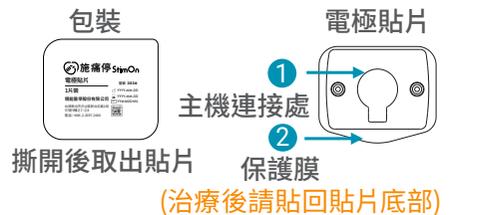


N字摺 完稿尺寸:216*113mm

Pantone 632 C

Pantone 144 C

內容物說明		指示燈號說明																			
<p>A.主機</p>  <p>1 電源開關 2 指示燈號</p> <p>3 4 USB防塵蓋 (充電時掀開) 貼片連接處</p> <p>B.電極貼片 x 2</p>  <p>包裝 電極貼片</p> <p>1 2 主機連接處 保護膜</p> <p>撕開後取出貼片 (治療後請貼回貼片底部)</p> <p>C.收納盒 D.USB充電線</p> <p>E.使用說明書、快速使用指南及產品保固卡</p>		<p>■ 藍燈恆亮:電刺激運作中 ■ 藍燈閃爍:連接出現問題 ■ 橘燈恆亮:充電中 ■ 橘燈閃爍:電量不足</p> <table border="1"><thead><tr><th>狀態</th><th>指示燈</th><th>震動</th></tr></thead><tbody><tr><td>充電中/充飽電</td><td>橘色燈恆亮/橘色燈熄滅</td><td></td></tr><tr><td>開機</td><td>藍色燈亮起</td><td>連續震動3次</td></tr><tr><td>治療中</td><td>藍色燈恆亮</td><td>每5秒震動1次</td></tr><tr><td>治療完成</td><td>藍色燈熄滅</td><td>連續震動3次</td></tr><tr><td>電量不足</td><td>橘色燈閃爍後開機</td><td></td></tr></tbody></table> <p>• 主機與貼片結合示意圖</p>  <p>注意:貼片建議使用6次後更換</p>		狀態	指示燈	震動	充電中/充飽電	橘色燈恆亮/橘色燈熄滅		開機	藍色燈亮起	連續震動3次	治療中	藍色燈恆亮	每5秒震動1次	治療完成	藍色燈熄滅	連續震動3次	電量不足	橘色燈閃爍後開機	
狀態	指示燈	震動																			
充電中/充飽電	橘色燈恆亮/橘色燈熄滅																				
開機	藍色燈亮起	連續震動3次																			
治療中	藍色燈恆亮	每5秒震動1次																			
治療完成	藍色燈熄滅	連續震動3次																			
電量不足	橘色燈閃爍後開機																				

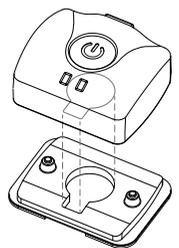

施痛停 疼痛舒緩系統
StimOn™ Pain Relief System

型號 GM 2439

快速使用指南

—— 精能醫學 ——

113mm

72mm

72mm

72mm

1 主機初次使用前先充電

- (1)掀開USB防塵蓋
- (2)將USB充電線、主機及充電器連接後，橘色燈恆亮
- (3)充飽電後(至少30分鐘)橘色燈熄滅，充飽後約可使用6次



注意：USB的長邊朝上

2 清潔貼附位置

- (1)治療前請擦拭乾淨欲治療的部位
- (2)待乾燥後才開始治療



3 準備電極貼片

撕下貼片底部的貼片保護膜

注意：治療完成後請將保護膜貼回貼片底部，以避免水凝膠乾裂失效



4 將主機與電極貼片連接


貼片的凸點朝上以與主機底部結合



5 選擇欲治療的部位

建議的使用部位如下：

- ① 腳踝疼痛：腳踝突起處下方或靠近腳後跟處
- ② 手指和手部疼痛：拇指根部
- ③ 肘關節疼痛：手臂內側靠近肘關節處
- ④ 腕關節疼痛：手腕內側中央處

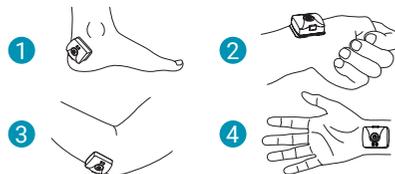

6 進行電刺激

- (1)開機(請貼至欲治療的部位後才開機)：按下電源開關，藍色燈亮起，主機震動3次
- (2)治療15分鐘：藍色燈恆亮，主機每5秒震動1次
- (3)治療完成：藍色燈熄滅，主機震動3次
若治療後疼痛仍未緩解，建議可重覆使用



7 收納

- (1)取下主機及貼片
- (2)貼回貼片保護膜
- (3)將主機及貼片放置於收納盒中



醫療器材製造業者

精能醫學股份有限公司

地址：台灣新北市汐止區新台五路1段97號9樓之7、之8

電話：+886-2-2697-2680 傳真：+886-2-2697-2670

www.gimermed.com

72mm

72mm

72mm

113mm